

AUTO-CHEK[®]

Infrared Ear Thermometer:TS42

오토첵[®]

귀적외선체온계
사용 설명서

사용전 본 사용 설명서를 숙지
하시고 정확하게 사용하십시오.

FAST PERFORMANCE
USER CONVENIENCE
ACCURATE RESULT



제품기재사항

- "본기기는의료기기임"
- 품목명: 체온계/2등급
- 제품명: 오토첵
- 형명: TS42
- 수입품목허가번호: 수인 15-4129호
- 중량: 65g (배터리 제외)
- 포장단위: 1대/박스
- 제조번호: 제품에 표시
- 제조년월일: 제품에 표시
- 수입업자의 상호 및 주소: 다이아텍코리아(주)
서울특별시 송파구 새말로 5길 13
(문정동) 영신빌딩
- 제조의뢰자: AViTA Corporation
9F, No.78, Sec.1, Kwang-Fu Rd.,
San-Chung District, 24158 New Taipei City
Taiwan (R.O.C.) /대만
- 제조사: AViTA (Wujang) Co.,Ltd
No. 858, Jiao Road, Wujiang Economic
Development Zone, Jiangsu Province,
P.R. China /중국

오토첵 서비스센터

판매원: 다이아텍코리아(주)
서울특별시 송파구 새말로5길 13 (문정동) 영신빌딩
홈페이지: www.diatech.co.kr
무료전화: 080-574-0119
근무시간: 평일 09:00-18:00

제품 사양

- 사용목적
신체의 온도를 측정하는 기구
- 측정 범위
인체: 34°C~43°C
- 표시온도정확도
인체: 36°C~39°C 범위: ±0.2°C
그 외 범위: ±0.3°C
- 표시단위: 0.1°C
- 작동범위
주위 온도: 16°C~40°C
상대습도: RH≤85%RH
- 보관방법
주위온도: -20°C~+50°C
상대습도: RH≤85%RH
- 정격전압
DC3V/AAA x 2EA
- 전격에 대한 보호형식 및 보호정도
내부전원형기기, BF형 장착부
- 외부규격
134.3mm(L) x 42.4mm(W) x 47.6mm(H)


품질보증서

본 제품은 구입후 1년간 품질을 보증합니다.
단, 아래의 사항은 무상수리에서 제외됩니다.

- 고객님의 책임있는 사유로 인한 제품의 손상 및 훼손이 된 경우
- 자연재해 및 제품의 오용 부적절한 관리로 인한 제품의 손상
- 비 자격자의 부적절한 수리로 인한 손상
(절대로 임의 분해조립을 하지 마십시오.)

제품명	오토첵 TS42
구입일자	
구입처명	
구입처전화	
고객정보	성명:
	전화:
	주소:

제품의 각 부위별 기능

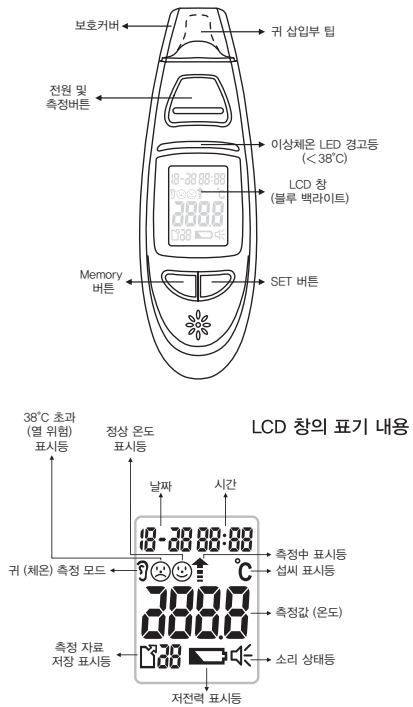


LCD 창의 표기 내용

간편사용법

- ① 체온은 측정하기 전에 보호커버가 닫혀 있는 상태에서 "SCAN" 버튼을 1초간 눌러 주십시오.
- ② 귀삽입부 팁(프로브)을 덮고있는 보호커버를 위로 올린 후 제거해 주십시오. (*▼그림 A)
- ③ 정확한 측정을 위하여 삽입부팁에 이물질이 없이 청결하게 하십시오. 이도(귀속모양)는 약간 구부러져 있기 때문에 아래와 같이 사용을 하십시오.



- 1살 미만: 아이의 머리가 옆으로 가도록 눌러 귀가 위로 올라오도록 한 뒤, 부드럽게 귀를 뒤쪽으로 잡아당깁니다. (*▲그림 B)
 - 1살 이상: 아이/성인의 측면 뒤에 서서, 부드럽게 귀를 위로 잡아당겨 이도를 곧게 합니다. (*▲그림 C)
- ④ 귀 삽입부 팁을 부드럽게 삽입 후 1초간 "SCAN" 버튼(측정버튼)을 눌러 주십시오.
 - ⑤ 측정버튼을 놓아 주시면 "삐" 소리가 나면서 아래와 같이 LCD의 화면이 바뀌면서 측정이 완료 됩니다.

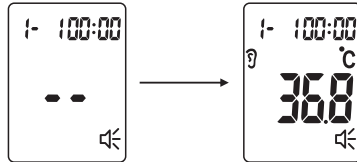

⑥ 측정온도가 38도 이상일 경우 "⊗" 아이콘이 표시되며, 동시에 블루 백라이트와 경고 등이 약 3초가 켜집니다.

⑦ 측정시 울리는 "삐" 소리를 제거 혹은 재생을 하고자 할경우 기기의 아래쪽에 있는 "SET" 버튼을 누르시면 LCD 표시창에 "ㄷ" 표시가 나타나거나 사라집니다.

제품의 손질 및 관리

● 프로브와 팁의 손질

측정 후 귀 삽입부 팁을 알콜솜(알콜면봉)을 이용하여 청결하게 유지하여 주십시오.

● 제품의 관리

- ① 부드럽고 마른 천으로 제품을 닦아 줍니다.
- ② 귀삽입부 팁 (프로브) 에 알콜솜 이외의 다른 세척제를 절대 사용하지 마십시오.
- ③ 귀삽입부 팁 (프로브) 가 파손/ 굽힘/ 이물질 등이 있을 경우 정확한 측정이 안됩니다.
- ④ 제품을 항상 상온 (0~40도) 및 적절한 습도에서 보관하시고 직사광선, 충격을 피합니다.

● 날짜 세팅

- ① 체온계가 켜진 상태에서 "SET" 버튼을 5초간 눌러 주면 세팅모드가 켜집니다
- ② "SET" 버튼을 눌러서 연도를 바꾼 후 "MEM" 버튼을 누르면 세팅이 됩니다.
- ③ 같은 방법으로 월, 일, 시간을 정합니다.

올바른 체온 측정법

체온을 측정하기 전 최소 30분 이상 체온계를 상온(실내온도)에서 보관 후 사용하십시오.

- ① 사람에 따라서 왼쪽과 오른쪽 귀의 체온이 다를 수가 있습니다. 체온의 변화를 올바르게 측정하기 위하여 반드시 같은쪽의 귀에서 지속적으로 측정을 해야 합니다.
- ② 어린이가 사용할 때는 반드시 보호자의 주의가 필요합니다.
- ③ 6개월 미만의 아이들은 이도가 얇아 체온이 종종 낮게 측정이 되는 경향이 있으니 항상 주의하여 체온을 측정하시기 바랍니다.
- ④ 염증성 질환, 귀 혹은 고막질환, 수술회복기 등에는 올바른 체온이 측정되지 않을 수 있으니, 반드시 의사와 상의하십시오.
- ⑤ 귀체온계를 여러사람이 함께 사용할 경우 귀속감염이 일어날 수도 있으니, 타인이 사용한 후에는 반드시 알콜등으로 귀속 삽입부를 소독 후 사용하십시오.
- ⑥ 오래동안 누워 있을 경우, 에어컨등에 오래 노출이 되었거나, 외출 후 들어와서 체온을 측정할 경우 체온이 약간 높거나 낮게 측정될 수가 있습니다.
- ⑦ 체온은 항상 실내에서 측정하시고, 체온계는 실온에서 보관하십시오.
- ⑧ 연속측정시 귀 삽입부의 온도가 이도에 영향을 미칠수가 있으므로 연속측정은 1분 간격으로 실시하시기 바랍니다.
- ⑨ 귀지는 삽입부(프로브)에 묻어 올바른 체온 측정에 영향을 미칩니다. 항상 알콜솜으로 이물질 제거를 하여 주십시오.